

# ELOFLEX H2

INSTRUCTION MANUAL  
BRUKSANVISNING  
BRUGSANVISNING  
OHJEKIRJA  
MANUALE DI ISTRUZIONI  
HANDLEIDING VOOR GEBRUIK  
GEBRAUCHSANWEISUNG  
INSTRUKCJA OBSŁUGI  
HASZNÁLATI UTASÍTÁS  
MANUEL DE L'UTILISATEUR



ELOFLEX

NORSK


# VELKOMMEN TIL DIN ELOFLEX

Takk for at du har valgt Eloflex som din elektriske rullestol. Vi er glade for at du har valgt Eloflex, for vår misjon er å forenkle hverdagen og øke friheten for mennesker med bevegelsesutfordringer.

Vi håper at du får glede av begge deler med din Eloflex, og at det skal være en god opplevelse å bruke din nye elektriske rullestol. Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om sikkerhet, bruk og vedlikehold. Vi anbefaler på det sterkeste at du leser gjennom hele dokumentet før du bruker Eloflex for første gang. Det anbefales også å øve på å bruke Eloflex på et stille, åpent og plant sted før du begir deg ut i andre omgivelser.

Vi er her for å støtte deg når du begynner å bruke Eloflex. Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

**Lykke til og stor glede med din Eloflex. Kjør forsiktig!**

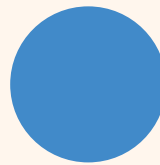

## INNHold

|  |    |   |    |
|--|----|---|----|
| Tiltenkt bruk                                | 3  | Armlener / Ryggstøtte                           | 11 |
| Brette ut / Brett sammen                     | 4  | Juster ryggstøtten / Lendestøttet               | 12 |
| Demontere / Montere                          | 5  | Låsemekanisme / Tippetisering / Manuell kjøring | 13 |
| Lading                                       | 6  | Sikkerhetsbelte / Transport og oppbevaring      | 14 |
| Installere joysticken / Legge ned joysticken | 7  | Kjøring   | 15 |
| Bruke joysticken                             | 8  | Sikkerhetsinstruksjoner ved kjøring / Sikkerhet | 16 |
| Ytterligere funksjoner                       | 9  | Generelle sikkerhetsanvisninger                 | 17 |
| Fotstøttet                                   | 10 | Tekniske spesifikasjoner                        | 18 |

# TILTENKT BRUK

---

## Klassifisering og tiltenkt bruk

Eloflex el-rullestoler er utviklet for personer som har problemer med å gå eller ikke kan gå i det hele tatt, men som har syn, fysiske og mentale evner til å kontrollere en el-rullestol.

Eloflex el-rullestol er tilstrekkelig kompakt og fleksibel for innendørs bruk, men den er også egnet for utendørs bruk. I kapittelet ""Tekniske data"" bakerst i dette dokumentet finner du informasjon om hastighet, svingradius, rekkevidde, maksimal løftekapasitet, maksimal brukervekt osv.

Eloflex er testet og godkjent i henhold til EN12184:2014 - Klasse B (innendørs og utendørs bruk). Eloflex er også godkjent i henhold til ISO-7176, IEC60601, og batteriene er godkjent i henhold til UN38.3.

Eloflex elektriske rullestoler oppfyller de gjeldende kravene i MDR 2017/745.

MDR klasse 1 samsvarsvurdering/CE-merking er utstedt i samsvar med Vedlegg VIII kapittel III i MDR 2017/745. Prosedyre for samsvarsvurdering: Vedlegg II og Vedlegg III i MDR 2017/745. CE-merkingen blir ugyldig dersom du bruker reservedeler eller tilbehør som ikke er godkjent for dette produktet.

## Behov

Formålet med en Eloflex elektrisk rullestol er å kompensere for en skade eller funksjonsnedsettelse, og den anbefales i følgende tilfeller:

- Hvis brukeren ikke kan gå eller har svært begrenset gangfunksjon, noe som gjør det vanskelig å bevege seg i eget hjem.
- Hvis det er behov for å forlate hjemmet for å gå ut eller besøke steder man regelmessig oppsøker i hverdagen.
- Når brukeren har problemer med å nå eller utføre arbeid eller aktiviteter på grunn av bevegelseshemninger.

Det anbefales å bruke Eloflex elektriske rullestoler både innendørs og utendørs hvis det ikke er mulig å bruke håndbetjente rullestoler på grunn av bevegelsesproblemer, men det fortsatt er mulig å håndtere elektriske rullestoler på riktig måte.

## Tilbehør

Lader, reflekser og en veske med enkle verktøy følger med i oppbevaringsposen under setet ved levering.

## Bruksanvisning

Bruk kun Eloflex el-rullestolen når den er fullt funksjonsdyktig, ellers utsetter du deg selv og andre for fare. Følgende liste omfatter ikke alle mulige situasjoner, men beskriver visse forhold som kan påvirke el-rullestolens brukbarhet:

- Ikke bruk el-rullestolen hvis batteriene er defekte eller deformerte.
- Ikke bruk el-rullestolen hvis motoren er rykkete eller lager unormale lyder.
- Ikke bruk el-rullestolen hvis bremsefunksjonen ser ut til å være defekt.
- Hvis dekkene er slitte, må du kontakte assistansesenteret eller forhandleren.
- Hvis du oppdager skader på sikkerhetsbelte, armlener, sete, ryggstøtte, joystick eller andre deler av stolen, må du kontakte assistansesenteret eller forhandleren.
- Hvis du oppdager skader på det elektriske systemet (kabler, batterier, ladere osv.), må du kontakte assistansesenteret eller forhandleren.

## Produsentens garanti

Eloflex-garantien dekker utskifting av deler som er ødelagt, forutsatt at skaden ikke er forårsaket av brukeren. Garantien dekker ikke skader som skyldes ytre omstendigheter som tyveri, misbruk, feil bruk, lynnedslag eller modifikasjoner.

## Levetid

Eloflex har en estimert levetid på 5 år. Produktets levetid påvirkes imidlertid i stor grad av hvordan det brukes og vedlikeholdes. En Eloflex kan vare mye lenger hvis den blir tatt godt vare på og brukt i samsvar med informasjonen i dette dokumentet.

## Sikkerhetsforskrifter og risiko

BRUKEREN MÅ LESE SIKKERHETS- OG KJØREANVISNINGENE I DETTE DOKUMENTET FØR ELOFLEX-RULLESTOLEN TAS I BRUK."

# BRETTE UT OG BRETT SAMMEN

---


1. Plasser den sammenfoldede stolen på bakken som vist nedenfor. Løsne transportlåsen som sitter

på baksiden. Hold ryggstøtten og dra den oppover for å åpne stolen. Med den andre hånden, trykk setet

nedover til du hører et tydelig "klikk", som indikerer at låsen er aktivert.



2. **Viktig!** Sørg for at låsen er helt lukket for å sikre stolen i utslått posisjon.

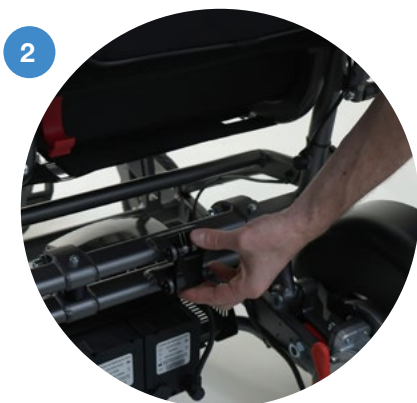


**Kontroller låsen før bruk.**

1. Trykk på den røde knappen for å løsnehovedlåsen som vist på bildet.

2. Plasser den ene hånden på forsiden av seteputen. Ta tak i toppen av ryggstøtten med den andre hånden og brett den forover. Skyv stolen sammen som vist. **Klempunkter!** Vær forsiktig når du bretter sammen


3. En praktisk transportlås kan kobles inn for å holde rullestolen i sammenfoldet stilling. Roter transportlåsen til den låser den motsatte stangen..

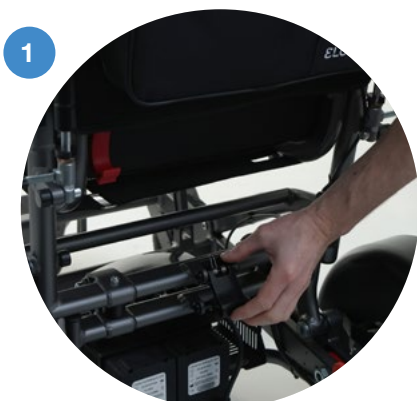

# DEMONTERE

---


1. Sørg for at stolen er helt sammenklappet, og at armlenene er senket. Vipp veltesikringene oppover. Løft deretter stolen til oppreist posisjon.
2. Trykk på den røde spaken for å løsne låsemekanismen.
3. Løft den øvre delen rett opp til den kan skilles helt fra. Siden delene er tunge og kan tippe, vær forsiktig når de håndteres separat i oppreist posisjon.

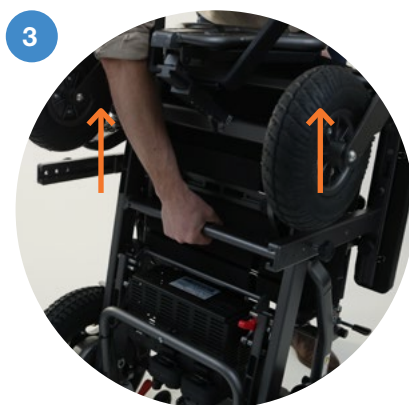

# MONTERE

---

1. Løft den øvre delen og plasser den riktig ved hjelp av styreskinnene på den nedre delen. Låsemekanismen går automatisk i inngrep, du hører et klikk, og kontakten er tilkoblet når den øvre delen er helt på plass.
2. **Forsiktig:** Etter montering må låsemekanismen kontrolleres for å sikre at den er forsvarlig låst før bruk.
3. Fold ut stolen igjen. Sørg for at låsekroken er lukket før du starter den elektriske rullestolen og bruker den.

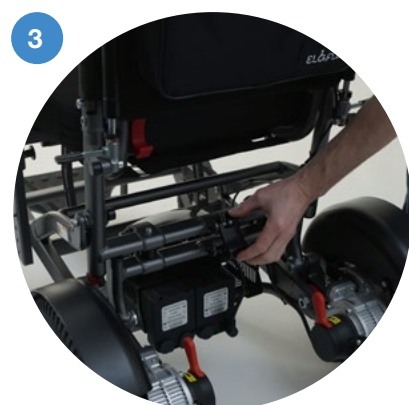

# LADING

---

## Før du begynner

- Lad din Eloflex ved levering.
- Bruk kun den originale laderen som fulgte med Eloflex.
- Laderen er kun beregnet på å kobles til styrespaken, ikke direkte til batteriene.
- Lad minst hver tredje måned for å unngå permanent skade på batteriene.

## Hvordan lade

Eloflex skal lades etter hver kjøretur eller når batteriindikatoren på styrespaken viser tre streker.

Begynn med å slå av Eloflex (alle lysene på styrespaken skal være av).

Koble laderen til kontakten på forsiden av styrespaken. Sørg for at kontaktene stemmer overens.

Koble laderens strømkabel til et vegguttak. Ladingen indikeres av en lampe på laderen. Et rødt lys betyr at ladingen pågår.

Etter ca. tre timer er batteriene 90 prosent ladet, og stolen kan tas i bruk.

Etter ca. 5-8 timer lyser laderen grønt, noe som indikerer at batteriene er fulladet. Under lading vil laderen bli varm, noe som er normalt.

Koble alltid laderen fra både stikkkontakten og rullestolen når ladingen er fullført. Lad aldri uten tilsyn. Batteriene kan lades ned til 0 grader. Ved lading ved lavere temperaturer kan det hende at batteriene ikke lades helt opp.

Hvis Eloflex brukes i minusgrader, påvirkes rekkevidden. Ved for eksempel -10 grader kan rekkevidden reduseres med opptil 50%.

## Langvarig lagring

Batteriene kan bli permanent skadet hvis spenningen blir for lav.

Vi anbefaler at du kobler fra batteriene for å minimere utladingen og lader dem regelmessig (minst én gang hver tredje måned).

La aldri laderen være permanent tilkoblet.



**Not charging the batteries regularly will cause permanent damage.**

# INSTALLERE JOYSTICKEN

---

1. Monter joysticken ved å feste hurtiglåsen på armlenet med låsen **(A)** vendt utover. Juster mutteren **(B)** slik at låsen kan lukkes helt og holder joysticken sikkert på plass. Joysticken kan monteres på høyre

eller venstre side med en adapter som kan kjøpes separat.

2. Koble kabelkontaktene sammen og vri dem forsiktig til pinnene passer inn i hullene og sporene i begge kontaktene passer sammen. Skru deretter hylsene godt fast på hvert tilkoblingspunkt.



# LEGG NED JOYSTICKEN

---

Den smarte joystickfesten lar brukeren raskt senke joysticken uten å fjerne den. Dette betyr at du kommer nærmere bordkanten, noe som gir en bedre sittestilling.

1. Løft låsearmen for å frigjøre joysticken.

2. Trekk joysticken forsiktig fremover. La deretter joysticken henge rett ned.



# BRUKE JOYSTICKEN

## 1. LCD-skjerm

## 2. Multifunksjonelle knapper

## 3. USB-kontakt

TIPS: Bruk USB-kontakten under styrespaken til å lade mobiltelefonen.

## 4. Inngang for lader

## 5. Lys

## 6. Hastighetsmåler

Viser din nåværende hastighet.

## 7. Hastighetsinnstilling

Viser hvor langt du har kjørt og den aktuelle hastigheten.

## 8. Tripp-/ODO-måler

Viser hvor langt du har kjørt siden siste gang du slo på bilen (trip) eller

den totale distansen for kjøretøyet (ODO)


## 9. Batterinivå

Indikerer hvor mye strøm som er igjen i batteriene. Når batteriene er fulladet, er alle stolpene hvite. Det anbefales å lade når tre søyler er brukt opp.




### Joystick

Kontrollerer stolens hastighet og retning.

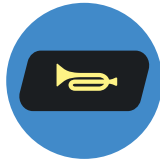

### Hupe

Trykk for å varsle om oppmerksomhet.

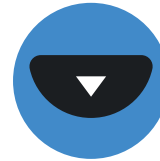

### Reduser hastighet

Trykk for å få stolen til å kjøre saktere



### Slå på og av

Trykk for å slå Eloflex på eller av.



### Øke hastigheten:

Trykk for å få stolen til å gå raskere.



### På/av-lys

Trykk for å slå lyset på eller av.




# YTTERLIGERE FUNKSJONER

---

## Justere innstillinger

Du kan endre stolens innstillinger, inkludert språk, hornvolum og måleenheter.

1. Trykk på høyre multifunksjonsknapp for å få tilgang til innstillingene. Dette viser en liste med alternativer.
2. Bruk hastighetsknappene til å bla opp og ned i listen over alternativer.
3. Velg en funksjon ved å trykke på høyre multifunksjonsknapp (Enter), eller gå ett trinn tilbake ved å trykke på venstre multifunksjonsknapp (Return).

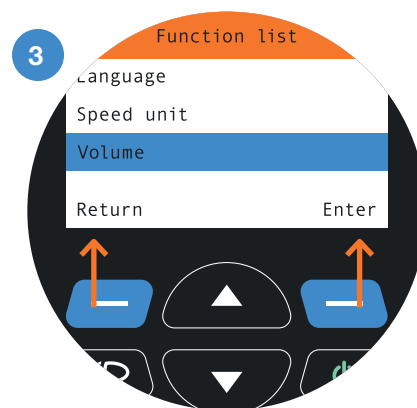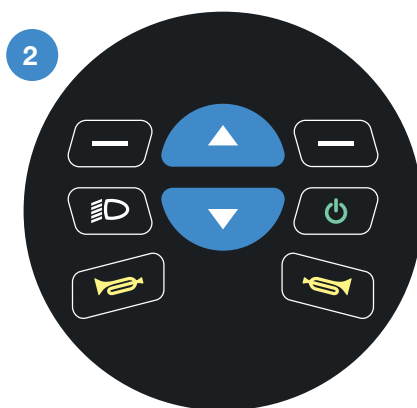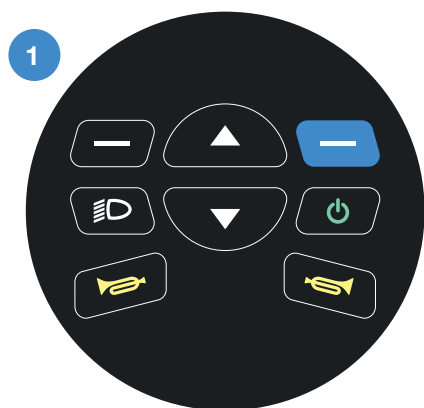

## Lås / barnesikkerhet

Du kan låse Eloflex elektronisk ved å trykke på pil opp og pil ned samtidig i 3 sekunder. Et lite symbol øverst i displayet vil indikere at låsen er aktivert. (Styrespaken må være slått på for å låse/låse opp).

## USB-ladeport

USB-porten kan lade mobiltelefoner, iPads og andre bærbare enheter. Den leverer 5 V strøm med ladestrømmen som bestemmes av den tilkoblede enheten, opp til maksimalt 2,1 A.

## Advarsler

Displayet kan vise feilkoder for å indikere feil. Feilkode 1 og 2 indikerer at magnetbremsene er aktive.

# FOTSTØTTE

---

## Brett opp fotstøtten

Fotstøtten kan foldes opp og inn som vist nedenfor for å gjøre det enklere å komme inn og ut av stolen.




## Juster fotstøtten

Du kan justere høyden på fotstøtten til to faste posisjoner.

1. Stram festeskruene **(A)** mens du holder mutteren.

2. Fjern det svarte plasdekslet fra mutrene.

3. Fest fotstøtten på nytt i det alternative monteringshullet. Hvis fotstøtten ikke blir i hevet posisjon, kan du justere spenningen ved å stramme festeskruene **(B)**.

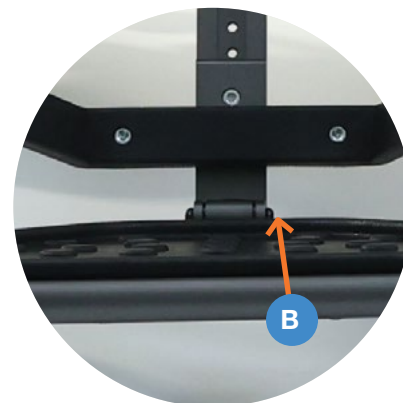

**Merk:** Monter leggstøtten, hvis den ikke allerede er installert, ved å feste den medfølgende braketten til midtsøylen med én skruer. Fest deretter leggstøtten til braketten med to skruer.


## ARMLENER

---

**Juster armlenene.** Juster høyden til en av tre posisjoner ved først å løsne festeskruen **(A)** og deretter trekke den indre låsen **(B)**. Etter justering stram skruen igjen for å hindre rasling.

Armlenet har to nedfellbare posisjoner, én nesten helt nede for sammenfolding og transport, og én helt på linje med setet for enklere inn- og utstigning. Juster bredden med skrue **(C)**.

Juster armlenet horisontalt (frem eller bakover) ved å trykke på den lille knappen under armlenet **(D)** og skyve puten. Slipp knappen for å låse den på plass.

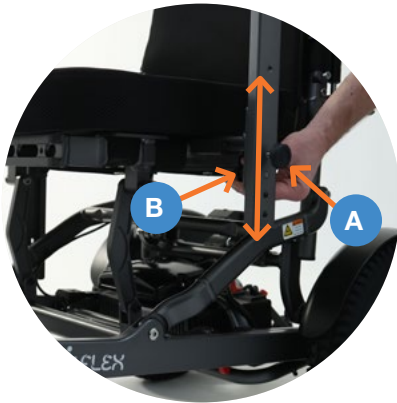

## RYGGSTØTTE

---

### Vippe ryggstøtten

For å endre vinkelen på ryggstøtten stegløst, trykk ned spakene på begge sider. Lene ryggstøtten til en komfortabel posisjon og slipp spakene for å låse den på plass.

### Juster høyden.


Høyden på ryggstøtten justeres ved å løsne skruene **(A)**. I høy posisjon kan toppen av ryggstøtten brukes som håndtak for transport av den sammenklappede stolen.



# JUSTER RYGGSTØTTEN

---

Trekk opp ryggbekledningen for å brette den ned. Stram borrelåsstroppene for å oppnå en komfortabel sittestilling. Brett deretter bekledningen ned igjen og trykk lett for å feste den til borrelåsstroppene.

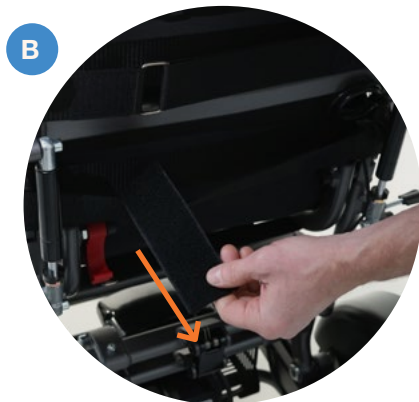



## TIPPESIKRING

---

Tippesikringen trenger ikke å justeres, men kan trekkes inn for transport på enkelte modeller. Rullestolen må ikke brukes uten at tippesikringen er aktivert, da dette utgjør en risiko for alvorlige personskader. Kontroller den før hver bruk.



**RISIKO FOR SKADER!**  
Sørg alltid for at tippesikringen er aktiv.

## MANUELL KJØRING

---

Slå av den elektriske rullestolen med styrespaken. Trykk deretter på de røde spakene på motorene (se bildet) for å koble fra magnetbremsene. I denne posisjonen kan stolen rulles manuelt. **Vær oppmerksom på følgende!** Hvis brukeren bruker stolen uten assistanse, må stolens magnetlås alltid være slått på.



**Ikke skyv de røde spakene med foten, bruk kun hendene.**

# SIKKERHETSBELTE

---

For sikker kjøring anbefaler vi at du alltid bruker sikkerhetsbeltet når du bruker stolen.



# TRANSPORT OG OPPBEVARING

---

- Når stolen skal løftes, anbefales det at den først brettes sammen og legges flatt, og deretter løftes opp i stående stilling før den til slutt løftes.
- En sammenfoldet stol kan legges i bagasjerommet på en bil eller settes i et klesskap.
- Fold ned eller fjern styrespaken under transport.
- Hvis stolen ikke skal brukes på en stund, må du sørge for at den

oppbevares riktig og at batteriene lades med jevne mellomrom i henhold til kapittelet "Hvordan lade". Ellers kan stolen bli ubrukelig. Stolen bør oppbevares innendørs i frostfrie, tørre og ventilerte områder.

- Oppbevaringstemperatur 0–30 grader.
- Puttrekkene er avtakbare og kan vaskes ved 40 °C.
- Ved transport med buss eller

handikaptransport må Eloflex festes i festepunktene (1–4) som er vist på bildene nederst. **NB!** Eloflex er ikke testet eller godkjent som bilstol. Det er derfor ikke tillatt å sitte i Eloflex under biltransport.

- Ved transport med fly, vennligst bekreft med flyselskapet før både bestilling og innsjekking. Eloflex følger anbefalingene fra IATA.



# KJØRING

---

## Les

Brukeren må lese disse sikkerhets- og kjøreinstruksene før bruk av Eloflex elektrisk rullestol.

## Øvelse

Øvelse gjør mester. Tren på å kjøre Eloflex sammen med en assistent ved å starte på en åpen flate, helst utendørs, før du bruker el-rullestolen blant andre mennesker, i butikker, på restauranter osv. Kjør fremover ved å bevege styrespaken sakte fremover. Stopp ved å slippe styrespaken.

## Kjør bakover

Kjør bakover ved å bevege styrespaken sakte bakover. Slipp styrespaken for å stoppe. Husk å alltid se bakover før du begynner å rygge, slik at du er sikker på at ingen personer eller gjenstander er i veien.

## Spinn

Snurr ved å bevege styrespaken forsiktig sidelengs. Pass på at ingenting er i veien for sidene når du snurrer.

## Sving

Sving mens du kjører ved å bevege styrespaken forsiktig sidelengs i samme retning som du ønsker å svinge. Senk alltid hastigheten når du svinger.

## Hinder

Øv deg på å unngå og passere hindringer. Beveg styrespaken sidelengs mens du kjører fremover for å unngå

hindringer. Husk å senke hastigheten når du nærmer deg hindringer.

## Rask kjøring

Rask kjøring: Trykk styrespaken i foroverposisjon hvis du vil kjøre fort. Husk å trekke inn styrespaken og senke hastigheten så snart du føler deg usikker, enten du svinger eller nærmer deg et hinder

## Kjør over hindringer

Kjør sakte frem til hindringen, og sørg for at forhjulene er i kjøreretningen. Beveg deretter styrespaken sakte forover mens du lener deg bakover for å kjøre over hindringen. Eloflex er testet og godkjent for hindringer opp til maksimalt 6 cm.

## Skrånende underlag

Prøv å kjøre rett opp eller ned for en skrå overflate. Len deg litt forover når du kjører opp, og bakover når du kjører ned, for å opprettholde tyngdepunktet. Unngå om mulig å kjøre sidelengs, og kompenser for en eventuell sidehelling ved å lene deg i motsatt retning. Kjør alltid sakte i skråninger, og vær oppmerksom på at bremselengden kan være betydelig større enn på plant underlag. Maksimal tillatt hellingsvinkel for denne rullestolen er 9 grader. Selv om din Eloflex er i stand til det, bør du unngå å kjøre i skråninger som er større enn den påkrevde testvinkelen på grunn av fare for alvorlig personskaide i tilfelle tipping.

## Heiser

Husk å sjekke bredden på heisdøren og hvor raskt døren lukkes før du går inn i heisen. Husk at du kan bli nødt til å rygge ut av heisen hvis den ikke er stor nok til at du kan snu.

## Kjøring på veien

Kjør primært på fortau, gangveier og sykkelveier.

## Kryss veibanen

Hvis det er mulig, velger du alltid å krysse veien ved et fotgjengerfelt. Vær oppmerksom på kryssende biler. Bruk avfaset del av fortauet hvis det er tilgjengelig. Unngå fortauskanter som er høyere enn 6 cm.

## Dekk

Hvis rullestolen er utstyrt med luftfylte dekk, må du jevnlig kontrollere lufttrykket ved 2,5 bar. Ved punktering må du avstå fra videre kjøring og kontakte forhandleren eller et egnet verksted for reparasjon.

# SIKKERHETSINSTRUKSJONER VED KJØRING

---

## Det er fare for alvorlig personskade hvis rullestolen tipper.

- Kjør kun i stigninger som ikke overskrider den maksimale angitte vinkelen.
- Bruk alltid tippesikring når du kjører med Eloflex.
- Nedoverbakker skal alltid kjøres med lavere hastighet.
- Unngå områder der det er fare for isete eller glatte overflater.
- Forsøk aldri å kjøre opp eller ned trapper med din elektriske rullestol.
- Kjør aldri over hindringer som er høyere enn den anbefalte maksimumshøyden.
- Unngå raske bevegelser med styrespaken og plutselige endringer i kjøreretningen under kjøring.

## Risiko for å bli sittende fast på avsidesliggende steder.

- En bruker med sterkt nedsatt bevegelighet bør ikke kjøre lengre strekninger utendørs alene.

## Fare for skade hvis en fot sklir av fotstøtten og faller under den elektriske rullestolen under kjøring.

- Plasser alltid føttene midt på fotstøtten under kjøring.

## Fare for personskade hvis du kolliderer med andre gjenstander.

- Kjør gjennom trange passasjer med lavest mulig hastighet og størst mulig oppmerksomhet.
- Vær ekstra oppmerksom når du nærmer deg eller kjører i nærheten av bord på grunn av klemfare mellom bordplaten og joysticken og/eller armlenet.

## Det er fare for at rullestolen kan velte hvis tippesikringen fjernes, skades eller monteres i en posisjon som avviker fra standardmonteringen.

- Tippesikringen må alltid være montert når den elektriske rullestolen brukes.
- Tippesikringen fungerer bare på fast underlag. På mykt underlag som gressplener og snø kan tippesikringen miste sin effekt. Derfor må du kjøre derfor svært forsiktig på mykt underlag.

## Karbonfiber

For våre karbonfibermodeller, merk følgende: Dette materialet har et utmerket styrke-til-vekt-forhold, noe som muliggjør den lave totalvekten. Materialet er imidlertid også sprøere enn andre materialer som aluminium og er mer utsatt for sprekker eller punktering. Derfor må et karbonfiberprodukt generelt behandles mer forsiktig enn andre produkter, og dette gjelder også for din Eloflex-rullestol.



# SIKKERHET

---

## Kryssing av jernbanespor

Kryss alltid jernbanesporet rett forfra, aldri skrått fra siden. Kryss aldri jernbanesporet alene, ha alltid med deg noen som kan hjelpe deg.

## Skarpe kanter

Vær forsiktig når du kjører i bratte bakker, da stolen kan brenke. Eloflex er testet og godkjent for stigninger på maksimalt 9 grader. Ha alltid med deg noen som kan hjelpe deg.

## Høye kanter

Vær forsiktig når du kjører opp eller ut for en kant. Eloflex er testet og godkjent for kanter opp til maksimalt 6 cm. Ha alltid med deg noen som kan hjelpe deg.

## Forflytning

Vi anbefaler at du alltid har med deg noen som kan hjelpe deg med forflytning til og fra Eloflex. Slå alltid av strømmen før du starter forflytningen. Løft alltid opp armlenene og fotstøtten før forflytning for å gjøre det lettere å komme inn og ut av stolen.

## Ikke reparer på egen hånd

Forsøk aldri å reparere en ødelagt elektrisk rullestol på egen hånd. Hvis du prøver å reparere stolen selv, gjelder ikke garantien. Henvend deg alltid til Eloflex eller til butikken eller hjelpemiddelsentralen som har solgt/forordnet stolen. Du må aldri gjøre endringer

på din elektriske rullestol på egen hånd.

## Ingen leketøy

La aldri barn som normalt ikke bruker el-rullestol sitte på eller bruke din Eloflex.

## Rengjøring

Eloflex må aldri rengjøres med rennende vann. Tørk den kun av med en fuktig klut. Hvis Eloflex er treg til å folde seg sammen, kan du smøre leddene med olje eller silikonpray.

## Vær forsiktig med varme

La aldri Eloflex stå i direkte sollys, i nærheten av en varmekilde eller åpen ild. Batteriene kan bli skadet, og enkelte overflater kan bli så varme at det er fare for personskader. Du kan bruke din Eloflex fra -10 grader og opp til +45 grader. Ved lave temperaturer vil rekkevidden påvirkes. Rullestolen er antenneselsbestandig i henhold til EN 12184.

## Oppbevaring

Oppbevar Eloflex utilgjengelig for barn når den ikke er i bruk. Stolen skal oppbevares innendørs i frostfrie, tørre og ventilerte rom. Oppbevaringstemperatur 0-30°C.

## Laderen

Laderen må aldri tildekkes når den brukes til å lade Eloflex. Laderen blir varm, og det er fare for ulykker eller personskader.

## Batteriene

Batteriene må aldri oppbevares i direkte sollys eller på et sted som kan nå temperaturer under null grader. Batteriene skal oppbevares på et tørt og ventilert sted. Ved avhending må batteriene resirkuleres i henhold til

i henhold til nasjonale/lokale krav. Vær oppmerksom på at rekkevidden, i likhet med alle batteridrevne produkter, vil reduseres over tid, også i garantiperioden og i produktets levetid.

## Bruk

Eloflex el-rullestol er utviklet for å dekke en rekke ulike behov. Avgjørelsen om egnethet for brukeren tas av koordinatoren eller forhandleren og brukeren i fellesskap. Eloflex kan ikke påta seg ansvar dersom el-rullestolen ikke er hensiktsmessig tilpasset brukerens behov.

## Modifikasjoner

Din Eloflex skal primært brukes i standardkonfigurasjonen. Eventuelle endringer eller justeringer må kun utføres av ditt autoriserte servicesenter eller av Eloflex. Vær oppmerksom på at skader eller funksjonsfeil som skyldes endringer som ikke er i samsvar med bruksanvisningen, eller som skyldes mangelfullt vedlikehold, ikke dekkes av garantien.

# GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER

---

## **Det er fare for personskade hvis den elektriske rullestolen brukes til andre formål enn det som er beskrevet i dette dokumentet.**

- Bruk el-rullestolen kun i henhold til instruksjonene i denne bruksanvisningen (se kapitlet "Typeklassifisering og tiltenkt bruk" ovenfor).
- Rullestolen må aldri brukes (sitte i) mens den transporteres i en annen bil/buss.

## **Det er fare for personskade hvis den elektriske rullestolen brukes ved redusert kjøreevne.**

- Ikke bruk rullestolen når kjøreevnen er nedsatt på grunn av f.eks. sykdom, medikamenter eller alkohol.

Det er fare for personskade hvis den elektriske rullestolen ufrivillig flyttes.

- Slå av rullestolen før du går inn og ut av den, eller hvis det er fare for at du, en annen person eller en gjenstand kan komme i kontakt med joystickken.
- Når motorene er koblet ut, fungerer ikke bremsene. Rullestolen må derfor bare skyves på flatt underlag, aldri i skråninger. Rullestolen må aldri etterlates i eller i nærheten av bakker med utkoblede motorer.

## **Det er fare for personskade hvis den elektriske rullestolen slås av under kjøring, f.eks. med av/på-knappen eller ved å rive av en kabel, da**

## **den stopper med et hardt rykk.**

- Slipp styrespaken når du bremser i en nødsituasjon. Da stopper rullestolen automatisk.

## **Det er fare for personskader på grunn av fall fra rullestolen**

- Ikke beveg deg fremover, ikke bøy deg fremover mellom knærne og ikke len deg over rullestolkanten, for eksempel for å nå gjenstander.
- Det anbefales at du alltid bruker sikkerhetsbeltet og justerer det før hver tur.
- Ved forflytning mellom seter/kjøretøy bør du kjøre så nær den nye posisjonen som mulig for å minimere avstanden og risikoen for at rullestolen tipper.

## **Det er fare for personskade hvis den maksimalt tillatte belastningen overskrides.**

- Overhold den maksimalt tillatte belastningen (se kapitlet "Tekniske data" bakerst i dette dokumentet).
- El-rullestolen må kun brukes av én person. Rullestolen må aldri brukes til å transportere mer enn én person om gangen.

## **Det er fare for personskade og skade på rullestolen hvis låsen løsner når el-rullestolen ikke er ordentlig fastspennet når den brukes.**

- Hvis låsen på den elektriske rullestolen ikke har klikket ordentlig på plass, kan stolen plutselig kollapse når den brukes, noe som kan føre til at du faller ut av rullestolen.
- Kontroller alltid at låsekroken er i riktig posisjon før du bruker den elektriske rullestolen.
- Det er fare for personskade og klemskader når rullestolen foldes sammen.
- El-rullestolen må alltid klappes sammen og heves som beskrevet i bruksanvisningen.
- Vær oppmerksom på at ingen eller ingenting kommer i klem når rullestolen brettes sammen og brettes ut.

## **Det er fare for personskader og skader på rullestolen hvis den brukes i fuktige områder.**

- El-rullestolen må ikke brukes under heining.
- El-rullestolen må ikke brukes når du bader.
- Unngå å kjøre i regnvær over lengre tid.

## **EMC**

- Det er fare for at rullestolen kan forstyrre, eller bli forstyrret av, utstyr på grunn av elektromagnetiske felt. Dette kan påvirke rullestolens betjening.
- Denne enheten er utstyrt med Bluetooth-sender. Kontakt forhandleren din for mer informasjon.

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER H2

|                                     |                                      |   |                                   |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
| <b>NETTOVEKT</b><br>Uten batterier  | 19 + 23 kg                           | <b>MAKS. HELLING</b><br>Dynamisk / Statisk  | 9° / 6°                           |
| <b>TOTALVEKT</b><br>Inkl. batterier | 46 kg                                | <b>MAKS. HINDRING</b>                       | 5 cm                              |
| <b>HASTIGHET</b>                    | 6,5 km/h                             | <b>HJUL</b><br>2,5 bar                      | 9" foran (luft)<br>13" bak (luft) |
| <b>REKKEVIDDE</b>                   | 30 km*                               | <b>SETE</b><br>H x B x D                    | 58 x 48-60 x 47                   |
| <b>VARIGHET</b><br>Per lading       | 5 h                                  | <b>MAKS. BRUKERVEKT</b>                     | 190 kg                            |
| <b>MOTOR</b>                        | x 2 børsteløs motor med høy effekt   | <b>STYRESPAK</b>                            | Høyre- eller venstremontert       |
| <b>MOTOREFFEKT</b>                  | 2 x 350 W                            | <b>PUTE</b>                                 | Avtakbart, avtagbart trekk        |
| <b>BATTERI</b><br>+1 ekstra plass   | 2 x litium-ion 10 Ah / 24 V (240 Wh) | <b>RYGGSTØTTE</b>                           | Justerbar vinkel 8-30°            |
| <b>BATTERIVEKT</b>                  | 1,8 kg                               | <b>STØRRELSE</b><br>H x B x D               | 102-112 x 65 x 125 cm             |
| <b>LADETID</b>                      | 3 h                                  | <b>STØRRELSE SAMMENFOLDDET</b><br>H x B x D | 54 x 65 x 98 (93**) cm            |
| <b>SVINGRADIUS</b>                  | 94 cm                                | <b>GARANTI</b>                              | 2 år                              |

\* Avstand under optimale forhold, og vil påvirkes av temperatur, kjørestil, høyde over havet, batteritilstand osv. For lengre rekkevidde og/eller høyere brukervekt anbefaler vi å bruke tre batterier.

\*\* Leggstøtte fjernet.

## © Copyright Eloflex

Dette dokumentet inneholder opphavsrettsbeskyttet informasjon og kan ikke kopieres eller reproduseres helt eller delvis uten skriftlig tillatelse fra Eloflex. Eloflex tar ikke ansvar for eventuelle trykkfeil i dette dokumentet og forbeholder seg retten til å gjøre produktendringer.

## Kontakt Eloflex

Hvis du har spørsmål, trenger hjelp eller trenger informasjon om produkttilbakekallinger eller sikkerhetsmeldinger, kan du kontakte ditt hjelpesenter eller din lokale forhandler. Ved behov kan du finne produktets serienummer på et klistremerke på undersiden av chassiset.

